

### 인화성 위험물 보관함

제이오텍 인화성 위험물 보관함은 국내 유일 CE (EN-14470-1 규격) 인증을 받은 제품으로, 독자 개발한 ‘공기유로 최적화 설계 [2016대한민국특허대상 수상 특허 10-1605164]’ 및 단열밀폐기술을 적용하여, 그 성능의 우수함을 인정 받아 조달청 우수제품 선정 및 중소기업벤처부의 성능인증을 획득한 화재 안전 캐비닛입니다.

본 제품은 화재 발생시, 보관중인 인화성 물질을 물리적으로 격리시키고, 시약장 내부 온도를 180K 이하로 30분, 60분 간 유지함으로써, 2차 화재 폭발 피해를 방지하는데 탁월합니다.

덕트를 직접 연결하거나 필터형 유해가스제거모듈을 장착하여 내부 인화성 증기를 제거하며, 주변의 열기를 감지하면 자동으로 도어를 닫고, 환기구를 폐쇄함으로써 열기가 침투하지 못하도록 설계되었습니다.

[제품 상세보기 ▶](#)


### 소개

### 이동형 유해가스 제거장치

캐스터가 장착하여 자유롭게 이동하며, 각종 Fume과 Gas를 제거하는 필터가 설치된 제품입니다. 다관절 암후드를 장착하여 실험중인 국소 영역의 공기를 흡입하여 안전한 실험환경을 조성할 수 있습니다. HEPA 필터는 공기 중의 미세먼지 99.9% 이상을 제거하며, Complex Carbon 필터는 SPS-KACA002-132 규격에 따라 시험 검증을 완료하였습니다. 그 외에도 Formaldehyde, Ammonia/Amine, Acid 필터가 있습니다. 사용하는 Fume, Gas 등의 물성에 따라 Polypropylene과 Anodized Aluminum 재질을 선택하고, 작업 공간에 따라 직경,길이 및 후드를 선택하여 최적의 제품을 구성할 수 있습니다.

[제품 상세보기 ▶](#)

### 제품사진

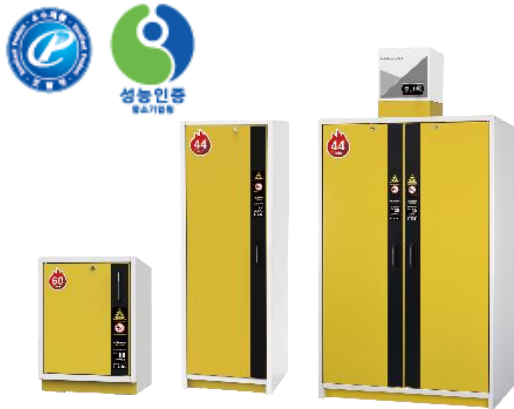

인화성위험물 보관함



이동형 유해가스 제거장치